

Millipore®

Preparation, Separation,
Filtration & Testing Products

MERCK 默克

用户指南

Amicon® Ultra-0.5 超滤离心管

适用于体积不超过500 µL的样本

仅供研究使用;不适用于诊断程序



上海
上海市浦东新区东育路227弄3号
前滩世贸中心(二期)C栋15-18层
电话: (021)20338288
传真: (021)50803042
邮编: 200126

北京
北京市朝阳区将台路甲2号
诺金中心25层
电话: (010)59072688
传真: (010)59072699
邮编: 100016

广州
广州市天河区流村路5号
凯华国际中心1201-1204
电话: (020)32255333
传真: (020)32255380
邮编: 510623

成都
成都市锦江区人民南路二段1号
仁恒置地广场1706室
电话: (028)80740222
传真: (028)80740227
邮编: 610016



默克微生物检测



一站式产品货期、定单物流、
发票、账款查询平台

默克生命科学技术服务热线: 400 620 3333或400 889 1988转2号线
中国技术服务中心: tscn@merckgroup.com
更多详情, 敬请登录: www.merckmillipore.com www.sigmaaldrich.cn
资料编号: 02/2022

默克生命科学业务在美国和加拿大以MilliporeSigma名称运营。
Merck KGaA
Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, Germany
merckgroup.com

© 版权归德国达姆施塔特默克集团 (Merck KGaA) 及其附属公司所有。保留一切权利。
默克和活力M是德国达姆施塔特Merck KGaA及其子公司的商标。所有其他商标均为其各自所有者的财产。
商标的详细信息可通过公开访问的资源了解。
普通合伙人公司 商业注册: AG Darmstadt HRB 6164 注册办公地址: 达姆施塔特
监督委员会主席: Wolfgang Büchele
执行委员会和普通合伙人: Stefan Oschmann (董事长兼首席执行官), Belén Garjón,
Kai Beckmann, Peter Guenter, Matthias Heinzel, Marcus Kuhnert

默克生命科学业务在美国和加拿大
地区以MilliporeSigma品牌运营

Millipore®

Preparation, Separation,
Filtration & Testing Products

简介

Amicon® Ultra-0.5超滤离心管具有快速超滤功能,能够达到较高的浓缩倍数,轻松实现从稀释和复杂的混和样本中浓缩回收目的产物。垂直设计的超滤膜以及较大的有效滤膜表面积有助于快速的样本处理,获得较高的样本回收率(通常>90%),并达到30倍的浓缩。根据标称分子量限值(NMWL)的不同,典型处理时间为10-30分钟。超滤膜的垂直设计也最大程度降低了溶质极化造成的滤膜结垢;死体积设计能有效防止过度离心使样本干掉而造成样本损失。收集滤出液后,浓缩样本(截留部分)可通过一个简便的倒置(上下反转)离心步骤而实现高效回收。Amicon® Ultra-0.5超滤管未经消毒,仅供一次使用。


Amicon® Ultra-0.5产品系列包括5种不同的截留分子量(即标称分子量限值, NMWL)。这些超滤管仅供研究使用,不适用于诊断程序。

- Amicon® Ultra 3K 超滤管 — 3,000 NMWL
- Amicon® Ultra 10K 超滤管 — 10,000 NMWL
- Amicon® Ultra 30K 超滤管 — 30,000 NMWL
- Amicon® Ultra 50K 超滤管 — 50,000 NMWL
- Amicon® Ultra 100K 超滤管 — 100,000 NMWL

应用

- 浓缩含有抗原、抗体、酶、核酸(DNA/RNA样本,单链或双链)、噬菌体等微生物样本,外泌体(exosome),微粒(如微珠、纳米材料)等
- 纯化组织培养提取液或细胞裂解液中的大分子成分,去除反应液中的引物、接头或分子标记,在HPLC前去除蛋白质
- 除盐,缓冲液更换,或渗滤

所提供的材料

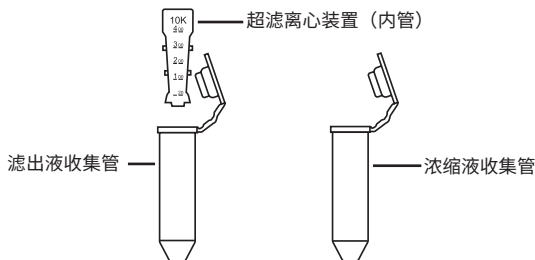

Amicon® Ultra-0.5超滤管提供了两个微量离心管。在操作过程中,一个用于收集滤出液,而另一个用于回收浓缩后的样本。

配套设备

可容纳1.5 mL微量离心管的固定角度转子离心机。

注意:为了避免离心过程中设备的损坏,在离心之前请清理、检查设备。

适用性评估

在尝试一个新的应用或建立新操作流程时,建议进行初步的回收和截留实验。请参看“如何量化回收”部分。

超滤管的储存

(15-30°C)室温存放。


预清洗

Amicon® Ultra-0.5超滤管的超滤膜含有痕量甘油。如果担心干扰后续分析,可用缓冲液或Milli-Q®水进行预清洗。如果干扰仍然存在,可用0.1 N NaOH清洗,再用缓冲液或Milli-Q®水清洗并甩干。

注意:Amicon® Ultra超滤离心管中的滤膜一旦润湿后应避免变干。如果在预清洗后不是立即使用,则让液体保留在滤膜上,直到使用。

如何使用Amicon® Ultra-0.5超滤离心管


1. 将Amicon® Ultra-0.5超滤内管插入所提供的微量离心管中。
2. 向Amicon® Ultra内管中加入不超过500 μL 的样本,并盖上盖子。
3. 将盖好盖子的超滤管放入离心转子中,让盖子的连接带朝着转子的中央;用一个类似的超滤管平衡。
4. 以14,000 x g离心约10-30分钟,具体时间取决于所使用超滤管的NMWL。为了确定合适的离心时间,请参看图1和表2。

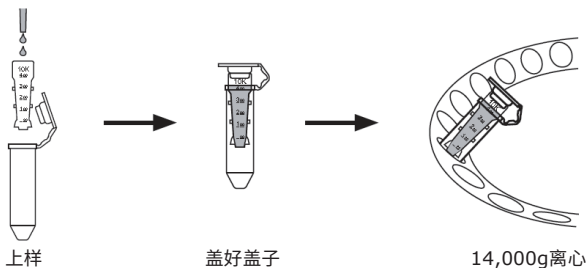

5. 离心结束后将整个超滤管从离心机中取出,取出内管。


6. 为了回收浓缩后的溶质，将内管倒过来插在一个干净的微量离心管中。放在离心机中，让打开的盖子朝着转子的中央；用一个类似的超滤管进行平衡。以 $1,000 \times g$ 离心2分钟，使浓缩后的样本从超滤内管转移到收集管中。超滤液可以保存在收集管中。

说明：要达到理想的回收效果，请尽早进行倒置离心。

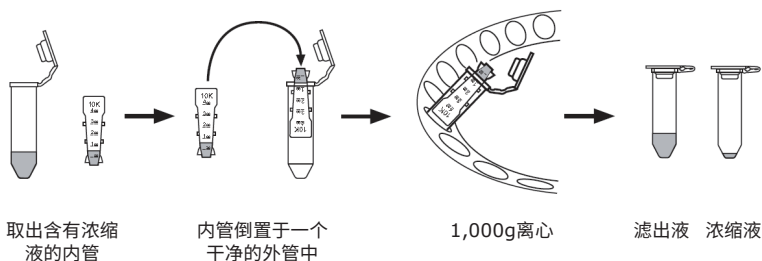

脱盐或渗滤 (Diafiltration)

脱盐、更换缓冲液或渗滤是从含有生物分子的溶液中去掉盐分或溶剂的重要方法。盐分去除或缓冲液更换可通过Amicon® Ultra-0.5超滤管来完成，具体过程是浓缩样本，弃去滤出液，然后向浓缩液中加入任何所需的溶剂，恢复到样本原先的体积。“洗出”的过程可反复进行，直到杂质的浓度被充分降低。请参看下面的例子。

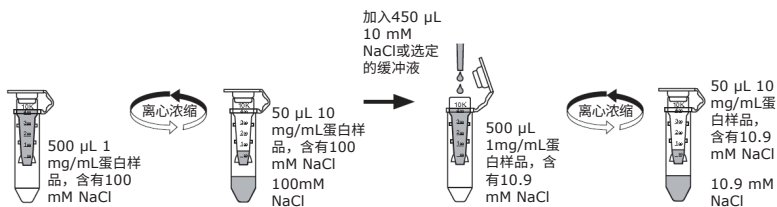

性能-DNA 浓缩

对于137至1159 bp的双链DNA,使用Amicon® Ultra-0.5 30K超滤管可以得到回收率和离心时间的最佳平衡。为了实现最高的PCR产物回收率并去除超过20个碱基的引物,建议使用Tris-EDTA (TE) 缓冲液进行一到两次额外的离心。

表1. Amicon® Ultra-0.5超滤管对核苷酸的典型回收率

PCR产物 (碱基对)	PCR引物 (碱基)	PCR产物回收率 (%)	PCR引物去除率 (%)	TE洗涤 (次数)
137	10	≥ 95	≥ 90	0
	20	≥ 90	≥ 85	1
	48	≥ 90	≥ 75	2
301	10	≥ 90	≥ 90	0
	20	≥ 85	≥ 90	1
	48	≥ 90	≥ 80	2
657	10	≥ 95	≥ 90	0
	20	≥ 90	≥ 90	1
	48	≥ 95	≥ 90	2
1159	10	≥ 90	≥ 90	0
	20	≥ 90	≥ 95	1
	48	≥ 95	≥ 95	2


离心条件:40°固定角度转子,14,000 x g,室温,100 μL PCR样品和400μL TE缓冲液合计起始体积500 μL,20-30 μL终体积,10分钟离心,n=12。

性能-蛋白质浓缩

流速

影响流速的因素包括样本浓度、起始体积、溶质的化学性质、相对离心力、离心转子的角度、滤膜类型以及温度。图1和表2给出了各种蛋白质分子量标准达到特定的滤出液体积或浓度所需的时间。500 μL样本的典型离心时间大约是10至30分钟(取决于超滤管的标称分子量限值)。尽管大部分样本在离心开始后的前5至10分钟发生过滤,但在离心10至30分钟后才能达到最小的浓缩液体积(15-20 μL)。

图1. 典型的滤出液体积与离心时间

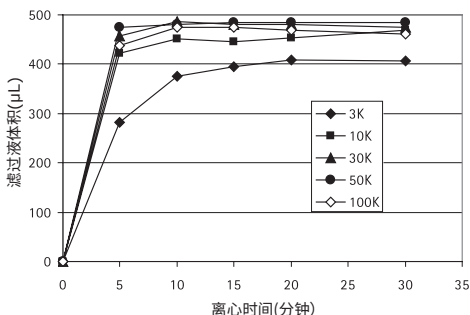

离心条件:40°固定角度转子,14,000 x g,室温,500 μL起始体积
操作样品:3K和5K超滤管用的样品是细胞色素c,30K和50K超滤管用的样品是BSA,100K超滤管用的样品是IgG,n = 8。

表2. 典型的浓缩液体积/浓缩系数与离心时间

离心时间 (分钟)	3K超滤管		10K超滤管		30K超滤管		50K超滤管		100K超滤管	
	浓缩液 体积 (μL)	浓缩 系数 (倍)	浓缩液 体积 (μL)	浓缩 系数 (倍)	浓缩液 体积 (μL)	浓缩 系数 (倍)	浓缩液 体积 (μL)	浓缩 系数 (倍)	浓缩液 体积 (μL)	浓缩 系数 (倍)
5	215	2	74	7	42	12	28	18	58	9
10	114	4	42	12	23	22	20	25	19	26
15	80	6	27	18	19	27	17	30	15	33
20	62	8	20	25	17	30	15	33	13	36
30	48	10	17	30	15	32	15	36	11	41

离心条件:40°固定角度转子, 14,000 x g, 室温, 500 μL 起始体积。

操作样品:3K和5K超滤管用的样品是细胞色素c, 30K和50K超滤管用的样品是BSA, 100K超滤管用的样品是IgG。n=8。带灰色背景的体积数值将被用来计算表4中的蛋白回收率。

蛋白质截留率和回收率

Amicon® Ultra超滤管的滤膜的截留能力采用标称分子量限值NMWL来进行衡量, 是指可截留特定分子量以上的溶质分子。分子量接近NMWL的溶质可能只有部分被截留。滤膜的截留率取决于溶质的分子大小和形状。在大多数应用中, 分子量是用来评估截留特性的一个方便的参数。各种目标蛋白在不同截留分子量的默克Millipore再生纤维素膜超滤管中的实际数据请参考表3。对于非近似球体的分子, 为了获得更大的回收率可以考虑选择NMWL为目标蛋白分子量的1/2-1/3。

表3. 蛋白质分子量标准的典型截留率

分子量标准/浓度	分子量	超滤管的 NMWL	截留率%	离心时间 (分钟)
α -Chymotrypsinogen (1 mg/mL)	25,000	3K	>95	30
Cytochrome c (0.25 mg/mL)	12,400		>95	30
Vitamin B-12 (0.2 mg/mL)	1,350		<42	30
α -Chymotrypsinogen (1 mg/mL)	25,000	10K	>95	15
Cytochrome c (0.25 mg/mL)	12,400		>95	15
Vitamin B-12 (0.2 mg/mL)	1,350		<23	15
BSA (1 mg/mL)	67,000	30K	>95	10
Ovalbumin (1 mg/mL)	45,000		>95	10
Cytochrome c (0.25 mg/mL)	12,400		<35	10
BSA (1 mg/mL)	67,000	50K	>95	10
Ovalbumin (1 mg/mL)	45,000		~40	10
Cytochrome c (0.25 mg/mL)	12,400		<20	10
Thyroglobulin (0.5 mg/mL)	677,000	100K	>95	10
IgG (1 mg/mL)	156,000		>95	10
Ovalbumin (1 mg/mL)	45,000		<30	10

离心条件:40°固定角度转子, 14,000 x g, 室温, 500 μL 起始体积, n = 12

决定样本回收率的因素包括蛋白质溶质相对于所选超滤管NMWL的特性(如空间构象)、起始浓度和浓缩系数。表4提供了Amicon® Ultra-0.5超滤管的典型回收率参考数据。

表4. 典型的浓缩液回收率

分子量标准/ 浓度	分子量	超滤管 NMWL	离心时间 (分钟)	浓缩液体积 (μ L)	浓缩系数 (倍)	回收率 (%)
Cytochrome c (0.25 mg/mL)	12,400	3K	30	48	10	98
Cytochrome c (0.25 mg/mL)	12,400	10K	15	27	18	95
BSA (1 mg/mL)	67,000	30K	10	23	22	97
BSA (1 mg/mL)	67,000	50K	10	20	25	92
IgG (1 mg/mL)	156,000	100K	10	19	26	92

离心条件: 40°固定角度转子, 14,000 x g, 室温, 500 μ L起始体积, n = 12。带灰色背景的体积数值来自表2。

最大化样本回收率

浓缩液的样本回收率低可能是由于吸附损失、过度浓缩, 或样本穿过滤膜而造成的。

- 吸附损失取决于溶质浓度及疏水性、操作温度和时间、样本成分及pH。为了最大限度降低损失, 离心后请立即回收浓缩后的样本。
- 如果样本的起始浓度很高, 请监控离心过程, 以免样本过度浓缩。过度浓缩会导致沉淀和样本损失。
- 如果样本穿过了滤膜, 请选择NMWL较低的Amicon® Ultra-0.5超滤管。

如何量化回收

使用以下方法计算总的回收量、浓缩液回收率%以及滤出液回收率%。此程序提供了浓度为20 mg/mL以内的溶液的回收率近似值。

说明: 相应的分析技术包括吸收光谱法、放射免疫分析、折射率和电导率。

直接称重操作

大多数稀释蛋白的密度与水的密度几乎相同(即1g/mL)。利用这一特性, 浓缩液和滤出液的体积可通过直接称量并将单位从g转化成mL来量化。本方法仅适用于浓度不超过20 mg/mL的溶液。

1. 使用前分别称量空的超滤内管、滤出液收集管和浓缩液收集管。
2. 在超滤内管中加入溶液, 再次称量。
3. 按照说明条件(已测浓度)并离心。
4. 将超滤内管放入预先称重的浓缩液收集管中, 倒置离心, 收集浓缩液。
5. 从浓缩液收集管中取出超滤内管, 对滤出液和浓缩液收集管进行称重。
6. 分别减去空的超滤内管或者对应的收集管的重量, 计算初始材料、滤出液和浓缩液的重量。
7. 测定滤出液和浓缩液浓度。

8. 利用重量/体积数据以及所测出的浓度计算回收率,方法如下:

$$\text{浓缩液回收率}\% = 100 \times \frac{W_c \times C_c}{W_o \times C_o}$$

$$\text{滤出液回收率}\% = 100 \times \frac{W_f \times C_f}{W_o \times C_o}$$

$$\text{总回收率}\% = \text{浓缩液回收率}\% + \text{滤出液回收率}\%$$

Wo = 初始材料的重量

Wc = 分析前浓缩液总重量

Wf = 滤出液的重量

Co = 初始材料的浓度

Cc = 浓缩液的浓度

Cf = 滤出液的浓度

产品规格

最大初始样本体积	500 μ L
最终浓缩液的典型体积	15-20 μ L
建议的相对离心力	14,000 \times g (浓缩离心) 1,000 \times g (反转离心)
最大的相对离心力	15,000 \times g
有效膜面积	1 cm^2
截留体积	< 5 μ L
尺寸	
超滤内管和外套	
长度(浓缩模式;超滤管插在管中)	49.9 mm (1.96 in.)
长度(反转离心;超滤管倒着插在管中)	47.4 mm (1.87 in.)
外套(已盖上盖子)	
直径:10.8 mm (0.43 in.)	长度:42.1 mm (1.66 in.)
内管	
直径:9.4 mm (0.37 in.)	长度:29.5 mm (1.16 in.)
超滤管材料	
内管	苯乙烯共聚物/丁二烯
超滤膜	Ultrasel® 低蛋白吸附再生纤维素膜
外套	聚丙烯

化学相容性

Amicon® Ultra离心超滤管适用于生物液体和水溶液。在使用前,请检查样本是否符合超滤管的化学相容性。

表5. Amicon® Ultra超滤超滤管的化学相容性

酸	浓度		浓度
乙酸	≤ 50%*	磷酸	≤ 30%
甲酸	≤ 5%*	氨基磺酸	≤ 3%
盐酸	≤ 1.0 M	硫酸	≤ 3%
乳酸	≤ 50%	三氯乙酸	≤ 10%*
硝酸	≤ 10%	三氟乙酸	≤ 30%*
碱			
氢氧化铵	≤ 10%	氢氧化钠	≤ 0.5 M
醇			
正丁醇	≤ 70%	异丙醇	≤ 70%
乙醇	≤ 70%	甲醇	≤ 60%
去污剂			
Alconox®去污剂	≤ 1%	Lubrol® PX去污剂	≤ 0.1%
CHAPS去污剂	≤ 0.1%	Nonidet™ P-40表面活性剂	≤ 2%
脱氧胆酸钠	≤ 5%	Triton® X-100表面活性剂	≤ 0.1%
十二烷基硫酸钠(SDS)	≤ 0.1%	Tween® 20表面活性剂	≤ 0.1%
Tergazyme®去污剂	≤ 1%		
有机溶剂			
丙酮	不建议使用	乙酸乙酯	不建议使用
乙腈	≤ 20%	甲醛	≤ 5%
苯	不建议使用	吡啶	不建议使用
四氯化碳	不建议使用	四氢呋喃	不建议使用
氯仿	不建议使用	甲苯	不建议使用
二甲基亚砷(DMSO)	≤ 5%*		
其他			
硫酸铵	饱和	苯酚	≤ 1%
焦碳酸二乙酯	≤ 0.2%	磷酸盐缓冲液(pH 8.2)	≤ 1 M
二硫苏糖醇(DTT)	≤ 0.1 M	聚乙二醇	≤ 10%
丙三醇	≤ 70%	碳酸钠	≤ 20%
盐酸胍	≤ 6 M	Tris缓冲液(pH 8.2)	≤ 1 M
咪唑	≤ 100 mM	尿素	≤ 8 M
巯基乙醇	≤ 0.1 M		

* 与此化学品接触可能会造成过滤器部件的材料溶出。建议使用空白溶剂来确定渗出物是否有可能干扰分析。

Amicon® Ultra超滤管订购信息

上样 体积 (mL)	浓缩后 终体积 (μ L)	品名	个/ 包	截留分子量				
				3K	10K	30K	50K	100K
0.5	15-20	Amicon® Ultra-0.5 device	8	UFC500308	UFC501008	UFC503008	UFC505008	UFC510008
			24	UFC500324	UFC501024	UFC503024	UFC505024	UFC510024
			96	UFC500396	UFC501096	UFC503096	UFC505096	UFC510096
			500	UFC5003BK	UFC5010BK	UFC5030BK	UFC5050BK	UFC5100BK
2	15-70	Amicon® Ultra-2 device	24	UFC200324	UFC201024	UFC203024	UFC205024	UFC210024
4	50-100	Amicon® Ultra-4 device	8	UFC800308	UFC801008	UFC803008	UFC805008	UFC810008
			24	UFC800324	UFC801024	UFC803024	UFC805024	UFC810024
			96	UFC800396	UFC801096	UFC803096	UFC805096	UFC810096
15	150-300	Amicon® Ultra-15 device	8	UFC900308	UFC901008	UFC903008	UFC905008	UFC910008
			24	UFC900324	UFC901024	UFC903024	UFC905024	UFC910024
			96	UFC900396	UFC901096	UFC903096	UFC905096	UFC910096

技术支持

如需更多信息, 请联系离您最近的默克办事处。

中国技术支持电话400-889-1988, email: TSCN@merckgroup.com。

标准保修

适用于本文件中所列产品的保修条款可垂询适用于您的购买交易的“购买条款和条件”。

声明

本文件中的信息随时可能更改, 恕不另行通知, 不能将其视为默克公司或其附属公司的承诺。默克公司及其任何附属公司对于本文件中可能出现的任何错误概不负责。

关于Amicon® Ultra超滤管的常见问题与解答

Q: Amicon® Ultra超滤管的膜材质是什么?

A: Amicon® Ultra超滤管的膜材质为默克Millipore特有的 Ultracel®再生纤维素膜,生产工艺严格,截留分子量明确而精准,蛋白吸附损失最小。

Q: 如果要用超滤的方法分离两种蛋白,那么这两个蛋白的大小需要相差多少?

A: 按照经验,建议两个蛋白的分子量要相差一个数量级(10倍)。

Q: Amicon® Ultra超滤管可以用于病毒浓缩么?

A: 可以。对于慢病毒推荐Amicon® Ultra 100kDa; 对于腺病毒推荐Amicon® Ultra 50kDa。具体的操作步骤可以参考病毒浓缩纯化试剂盒FTLV00003和FTAV00003的产品使用说明书。另提供AAV(腺相关病毒)的制备方法供参考。

Q: Amicon® Ultra超滤管可以用酒精消毒灭菌么?

A: Amicon® Ultra与70%乙醇是兼容的,但是对灭菌处理的具体方法没有做相关的测试,所以无法提供更进一步的参考信息。

Q: Amicon® Ultra超滤装置是否可以用于高压灭菌?

A: Amicon® Ultra都是采用热封设计,不可以用高压高温灭菌。

Q: Amicon® Ultra超滤管是否不含RNA酶?

A: 不保证超滤管不包含RNA酶,建议用0.1% DEPC在37度浸泡2小时,以完全灭活RNA酶;残留的DEPC可以用Milli-Q®超纯水洗涤除去。

Q: 用Amicon® Ultra超滤管去除去污剂是有什么需要注意的吗?

A: 去污剂因其独特的性质,当浓度大于临界微团浓度(Critical Micelle Concentration, CMC)时,去污剂分子会聚集形成微团而改变分子构象,这有可能会影响到去污剂的去除效果,具体的操作步骤请垂询默克生命科学技术支持专线400-889-1988。

Q: 蛋白在浓缩时出现了沉淀,如何改进?

A: 蛋白如果浓缩过快或者过度浓缩都有可能引起蛋白沉淀。建议蛋白浓缩后的最终浓度不超过20mg/ml。对于对浓缩速度敏感而容易沉淀的蛋白,建议的改进方法是:

- 1) 离心力降为推荐离心力的30%-50%
- 2) 改用截留分子量更大的超滤管(如原本选用10k,此时可以选择30k)
- 3) 在浓缩过程中取出超滤管,用枪头反复吹吸几次后再继续浓缩

Q: 浓缩后发现浓缩液中没有目的蛋白,可能的原因有哪些?

A: 首先,Amicon® Ultra超滤管的蛋白最低起始浓度为25ug/ml。请确保样本的起始浓度大于这个浓度。其次,如果问题仍然出现,请不要丢弃样本滤过液以便用于分析可能的原因:

- 1) 如果目的样本在滤过液中,那么请排查:
 - a) 是否选择了合适截留分子量的超滤管(目的蛋白分子量的1/2或者1/3)?
 - b) 使用的离心力是否是在限定范围内?如果使用的是rpm,请换算成相应的g离心力,具体换算方法请垂询。
 - c) 离心机最近是否有校准过?

- d) 是否首次尝试这个蛋白?如果能确保用同样的超滤管对其它蛋白成功操作的话,那么有可能是这个目的蛋白的原因。有时蛋白会因其本身的一些特性(构象差异)而影响浓缩效果,建议选用上一分子量级别的超滤管(如原本选用30k,此时可以选择10k)。
- 2) 如果目的样本也不在滤过液中,那么:
- 蛋白样本起始浓度是否大于25 ug/mL?
 - 用来确定样本浓度的方法是什么?是否可信?
 - 目的蛋白是不是沉淀了?如果是,具体解决方法请参考上面的关于蛋白沉淀问题的解释。

Q: 有时候用超滤离心管连水都离不下来,可能是什么原因?

A: Amicon® Ultra超滤膜中含有微量甘油。如果出现这种情况,请先用0.1 N NaOH清洗再离心。最后用缓冲液或Milli-Q®水再次清洗后甩干。清洗后的滤膜应立即使用,如暂时不用,请保持润湿状态,避免重新干燥。

Q: 说明书中推荐在室温下进行离心,考虑到蛋白的稳定性,是否可以在4°C进行离心?

A: 可以,但是低温会增加蛋白样品的粘性,导致流速减慢,建议可将离心时间延长到原来的1.5倍。

Q: 如何对超滤管进行去除内毒素的处理?

A: 提供的超滤管是没有过去内毒素处理的,同时由于内毒素通常以多聚体的形式存在,大小在10-1000KD之间不等,在超滤的过程中是无法去除的。可在实验前通过先用0.5M NaOH预清洗,随后用Milli-Q®水/缓冲液清洗的步骤去除大部分内毒素。关于针对Amicon®, Microcon®, Centricon®尝试过的内毒素去除方案,请垂询默克生命科学技术热线(400-889-1988)。

Q: 用浓缩后的蛋白做下游分析时发现有关干扰,可能有哪些原因?

A: Amicon® Ultra超滤膜含有微量甘油。如果此成分干扰分析,可用缓冲液或Milli-Q®水预清洗。如果干扰仍然存在,用0.1 N NaOH清洗,然后用缓冲液或Milli-Q®水再次清洗后甩干。

Q: 怀疑浓缩过程中目的蛋白和超滤膜之间可能存在非特异性吸附,如何改善?

A: Amicon® Ultra超滤管使用的是再生纤维素膜,这种材质是蛋白吸附最低的超滤膜。但是对于一些疏水性蛋白或非极性蛋白,它们和膜的非特异吸附可能会增强,对于这种情况,可以尝试在实验前对超滤管进行封闭处理,详细步骤请垂询默克生命科学技术热线(400-889-1988)。也可以尝试换成Amicon® Ultra 0.5或2来进行实验,通过减小膜面积来降低非特异性吸附。

更多浓缩/除盐/缓冲液置换相关产品

产品	典型应用	最大上样体积
Amicon® Ultra 0.5	 快速浓缩、脱盐换液	500µL (提供中文产品说明书)
Microcon®	 核酸快速浓缩、脱盐换液 去除小分子, 质谱样品制备	500µL
Ultrafree®	 澄清 / 预过滤、除颗粒	500µL, 2mL
Amicon® Ultra 2	 快速浓缩、脱盐换液	2mL
Amicon® Ultra 4	 快速浓缩、脱盐换液	4mL (提供中文产品说明书)
Amicon® Ultra 15	 快速浓缩、脱盐换液	15mL (提供中文产品说明书)
Centricon® Plus-70	 大体积样品浓缩、脱盐换液	70mL
Amicon® 搅拌超滤杯	 搅拌式温和浓缩, 适用于大体积样品、 高浓度样品、易沉淀样品等	3mL, 10mL, 50mL, 200mL, 400mL
Amicon® Pro	 纯化 / 浓缩 / 换液一体化操作	10mL (提供中文快捷操作指南)
D-tube™ 透析管	 温和透析, 蛋白复性	500µL~15mL
超滤多孔板	 高通量浓缩、脱盐换液	500µL
病毒纯化试剂盒	 慢病毒、腺病毒纯化、浓缩	(3次)

超滤的更多应用 (欢迎索取详细资料)

- 外泌小体(exosome) 标准化制备(新!)
- 浓缩/除盐/换液一体化操作
- 抗体标记与快速浓缩
- 易沉淀活性蛋白浓缩
- 去垢剂的去除
- 法医样本处理
- 温和透析(蛋白复性)
- 高通量样品处理



超滤产品手册

Amicon® Pro纯化超滤管

简单即是美

Amicon® Pro建立小量蛋白样品纯化-换液/除盐-浓缩流程 **新标准**

(配合AU0.5小体积超滤管使用)

操作步骤的优化与简化往往带来更好的结果,数据的稳定性、可比性和高通量化随之得以改善。默克生命科学新上市的Amicon® Pro纯化超滤管创造性地将纯化、换液、除盐和浓缩操作融为一体,减少样品转移损失和人为操作的繁琐和误差,使蛋白样品的处理更加标准化,数据结果便于评估和比较。宝贵的小量样本从此有了最佳的操作工具。

步骤少, 操作时间短, 结果好!


- ④ 亲和纯化
6次低速离心, 总耗时~100分钟 (含65分钟孵育时间)
- ④ 蛋白亲和纯化 (不做换液和浓缩)
3次低速离心, 总耗时~75分钟 (含60分钟孵育时间)
- ④ 用Protein A或G对抗体进行亲和纯化
7次低速离心, 总耗时~100分钟 (含60分钟孵育时间)
- ④ 抗体标记
5次低速离心, 总耗时~50分钟
- ④ 除盐/缓冲液置换并浓缩
5次低速离心, 总耗时~35分钟

ACS500024 Amicon® Pro 24Pack (不含AU0.5超滤管)

Amicon® 搅拌式超滤杯二代全新上市

您会为这些升级倍感欣喜:

- ④ 人性化的人体工程学创新设计: 组装、拆卸以及开关都极为方便
- ④ 整体安全性特点: 内螺纹固定-内置压力锁/释放阀设计, 不再需要原来难看又难装配的外部保护框架
- ④ 配套膜片选择更广, 包括超滤膜和微滤膜以及您自选的膜片
- ④ 提供操作视频和中文指南, 技术支持完备
- ④ 50 mL, 200 mL和400 mL可选
- ④ 用于膜通量测试, 浓缩/脱盐/换液

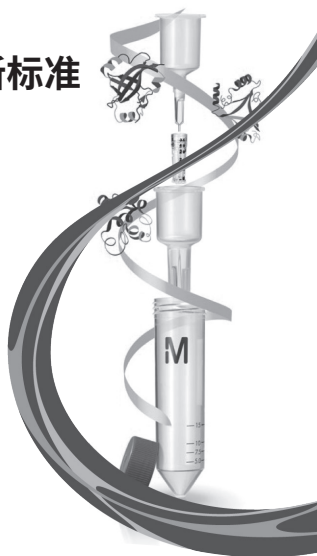

蛋白质研究

默克众多创新技术支持您的探索与发现

经过整合,备受欢迎的来自原Novagen、Calbiochem和Sigma的产品构成了默克生命科学新的全明星蛋白研究产品线,全面支持您的蛋白研究。

蛋白质组研究揭示基因表达及调控的特征和变化。Seppro® 高丰度蛋白去除试剂盒可以大幅度降低样品的复杂程度,用更少的样品获得更多关于低丰度蛋白的信息。采用Duolink® PLA(邻位连接技术)能直观、快速、定量、高通量地进行蛋白互作筛选。基于质谱分析的应用愈发广泛,我们的SILu™ MAb,AQUA™多肽及蛋白标准品已经成为蛋白表达定量研究和氨基酸修饰分析的基本工具。完整强大的原核(大肠杆菌pET)和真核(BacMagic™ 3昆虫细胞,UCOE®哺乳动物细胞)表达系统在各个实验室里提供高产量的蛋白生产。新的Immobilon® PVDF低荧光背景转印膜为WB的荧光检测带来信噪比更好的实验结果。Amicon® Ultra超滤管的应用贯穿于蛋白研究的多个环节,其在外泌体和病毒制备等方面的新应用使之成为疾病机理和细胞治疗研究的基本工具。

默克生命科学作为行业领军品牌,除了提供优质的产品,不断推出创新技术,更拥有专业化的技术支持团队,为您能用好我们的产品、了解最新前沿技术,提供方便的咨询服务。

了解更多,欢迎登录网站查询:

<http://www.sigmaaldrich.com/china-mainland/zh/life-science/proteomics.html>

默克生命科学蛋白研究领域重点产品板块:

- 蛋白质组/植物蛋白质组
- 质谱与定量
- PEPscreen定制多肽库
- 蛋白芯片
- 翻译后加工修饰
- Duolink®蛋白互作检测
- 细胞器与天然蛋白样品制备
- 蛋白色谱
- 蛋白电泳
- 蛋白结构分析
- 重组蛋白表达与纯化
- 蛋白浓缩、脱盐与换液
- Western Blot
- PHA金标抗体